

CALCULATEUR BOLUS

une fonction utile
de l'Omnipod DASH

Plus de liberté
dans la gestion du diabète


Fiche technique

Le **calculateur de bolus** permet d'adapter le bolus en fonction de la **quantité de glucides** présente dans votre repas et de votre **glycémie** avant le repas. Il permet également de corriger une glycémie élevée en dehors des repas.

1 J'appuie sur le flacon d'insuline présent en bas de l'écran.



2 J'appuie dans le rectangle « **Entrer glucides** » et je saisis la quantité de glucides présente dans mon repas. (Seulement si je prends un repas, dans le cas contraire entrer 0g.).

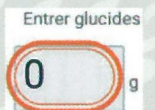

3 J'appuie sur « **ENTRER LA GLY** » et je saisis la valeur de glycémie prise avant le repas.



4 Le bolus est calculé automatiquement. J'appuie sur « **CONFIRMER** ».


5 J'appuie sur « **DEMARRER** » ou « **DEBUT** » pour lancer l'administration du bolus.




BOLUS PROLONGÉ

Fiche technique

La fonctionnalité **bolus prolongé** s'utilise lors d'un **repas qui dure dans le temps** (par exemple un repas de fête). Le bolus prolongé va permettre d'éviter l'hypoglycémie en distribuant une partie du bolus maintenant et le reste sur une durée que vous aurez déterminée.

- 1 J'appuie sur le flacon d'insuline présent en bas de l'écran. 
- 2 Je rentre le nombre d'unité que je souhaite pour mon bolus.
- 3 J'appuie sur « **PROLONG. BOLUS** ».

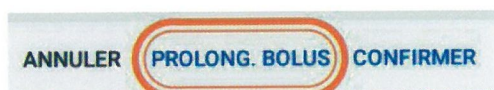

- 4 J'entre la quantité de bolus repas que je souhaite administrer maintenant en pourcentage. La portion prolongée sera automatiquement ajustée.

Actuel	Prolongé
40 % 1,60 U	60 % 2,40 U

- 5 J'indique la durée sur laquelle je souhaite faire passer la portion prolongée.
- 6 J'appuie sur « **CONFIRMER** ».
- 7 J'appuie sur « **DEMARRER** » ou « **DEBUT** ».

