

5- Faire un Bolus repas

Administrer un bolus



Automatisé



Manuel

Remarque : Le bouton UTILISER LE CAPTEUR n'est actif que lorsque l'Omnipod 5 reçoit les valeurs du capteur de glucose.


Remarque : Le bolus prolongé est disponible en Mode Manuel uniquement.

1




- Appuyez sur le bouton Bolus sur l'écran d'accueil.

2

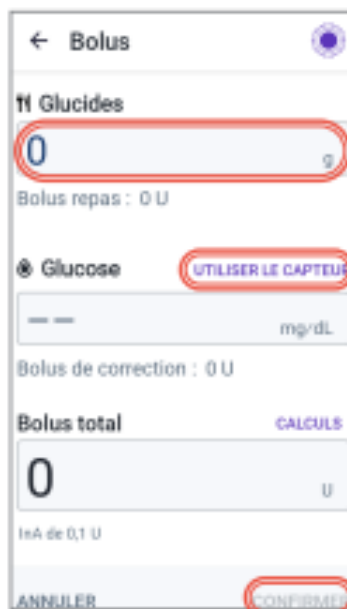


- Appuyez sur le champ Glucides pour entrer manuellement les glucides.
- Appuyez sur **UTILISER LE CAPTEUR** pour utiliser la valeur et la tendance du capteur de glucose ou ajoutez une valeur de glycémie en appuyant sur le champ Glucose.
- Appuyez sur **CONFIRMER**.

3

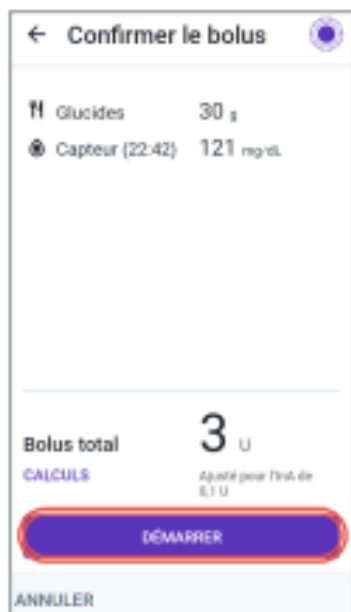

- Les entrées vérifiées sont correctes.
- Appuyez sur **DÉMARRER** pour lancer l'administration du bolus.

4

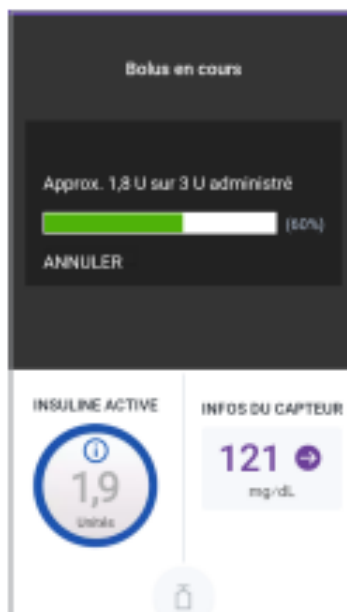

- L'écran d'accueil affiche la progression de l'administration du bolus.

5- Faire un Bolus repas "adapté"

Dans le cas où :

- vous ne connaissez pas le menu,
- ou bien vous avez sous estimé la quantité de glucides au repas et vous êtes toujours à table
- ou encore, vous consommez un repas dans la durée
- ou vous consommez un repas gras et sucré du type tartiflette

Il est possible de faire un bolus en plusieurs fois :

1

Suivre la même procédure que le bolus classique, en entrant cette fois **la quantité de glucides estimés pour le 1er plat ou 1ere moitié de repas**

2

Refaites la procédure, en entrant la quantité de glucides estimés pour la suite du repas ou le prochain plat, uniquement, **sans sélectionner "utiliser le capteur"**

3

Renouveler cette procédure, si besoin, en entrant la quantité de glucides estimés pour la suite du repas ou le prochain plat, uniquement, **sans sélectionner "utiliser le capteur"**